



B. Braun OnlineSuite

Für ein effizientes Infusionsmanagement

B. Braun OnlineSuite

Für Fortschritt in Ihren Prozessen


Technologie führt dann zu einem Fortschritt, wenn sie Prozesse vereinfacht und erleichtert. Die Softwarelösung B. Braun OnlineSuite zielt darauf ab, Ihre Prozesse rund um die Infusionstherapie bestmöglich durch verschiedene Anwendungen zu unterstützen, nachhaltig zu verbessern und allen involvierten Parteien das Arbeiten mit und um die Infusionspumpen von B. Braun zu erleichtern.


Die flexible und modulare Plattform eint bestehende und zukünftige Softwarelösungen. So ist es zum Beispiel möglich

- den Überblick über alle Infusionspumpen einer Station zu behalten
- von einem zentralen Ort aus Medikamentendatenbanken zu erstellen und zu versenden
- Berichte und Statistiken der applizierten Medikation zu generieren und
- den Gerätepark der Infusionspumpen zu organisieren und zu verwalten


Möglich ist dies durch die Nutzung standardisierter IT-Technologien, die gleichzeitig eine einfache Integration in bestehende Krankenhaus- und IT-Infrastruktur ermöglichen.

Lassen Sie sich von der OnlineSuite und ihren Anwendungen begeistern.

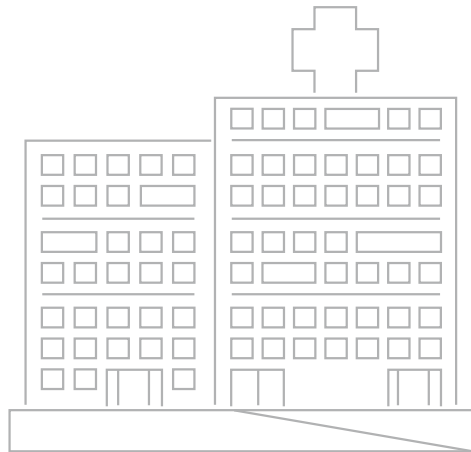


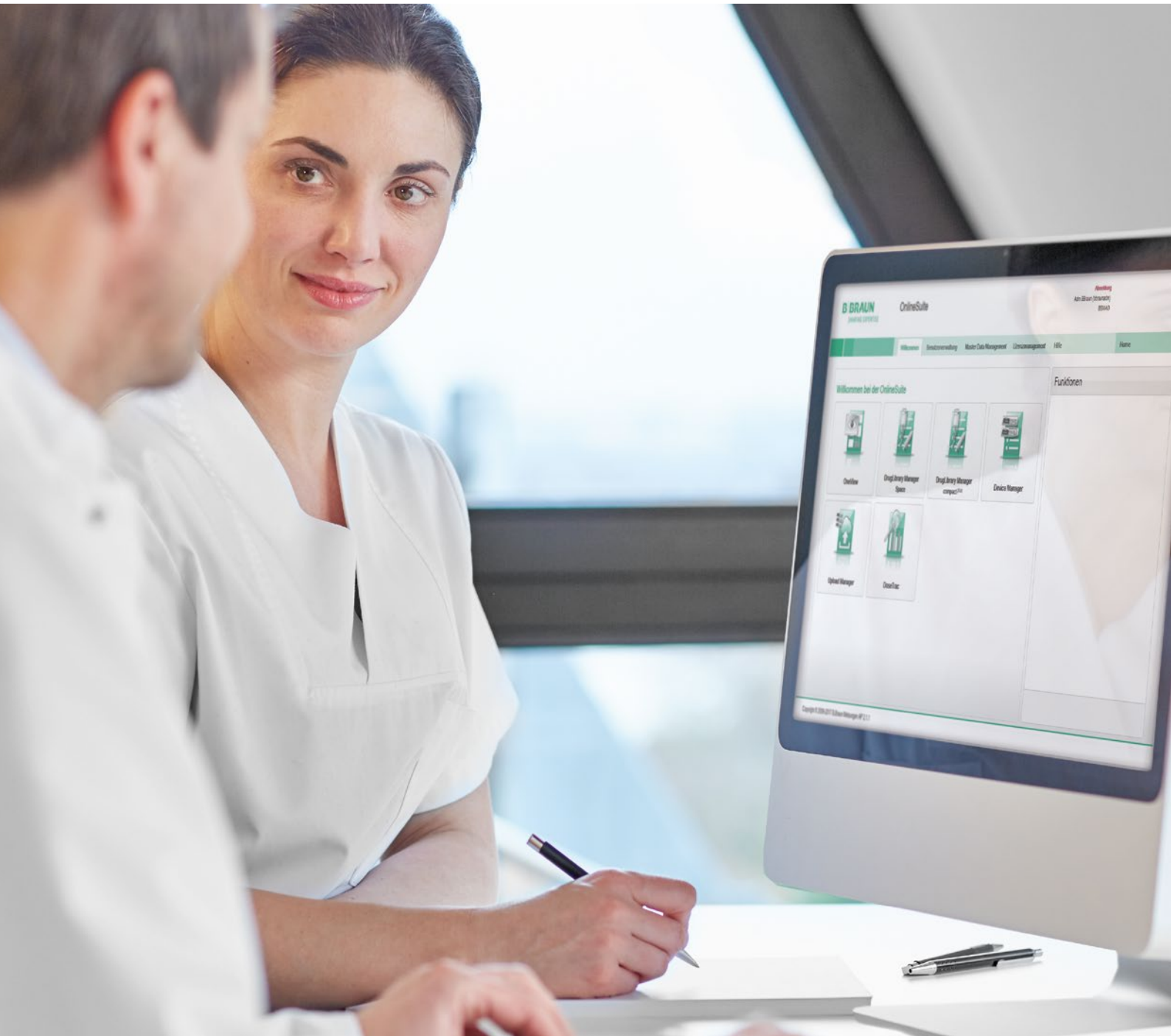




Die Apps der B. Braun OnlineSuite

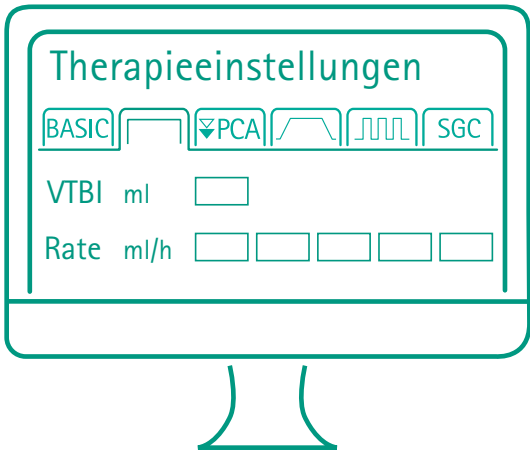

Drug Library Manager



Therapieeinstellungen

BASIC  PCA  SGC 

VTBI ml


Rate ml/h




Upload Manager






 







DoseTrac



Analysen
Berichte

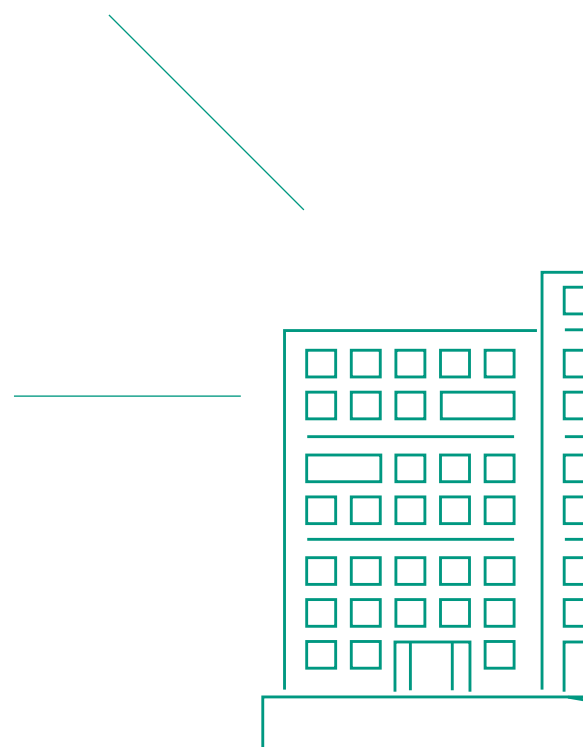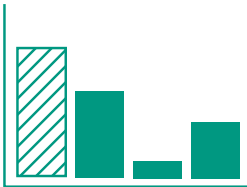

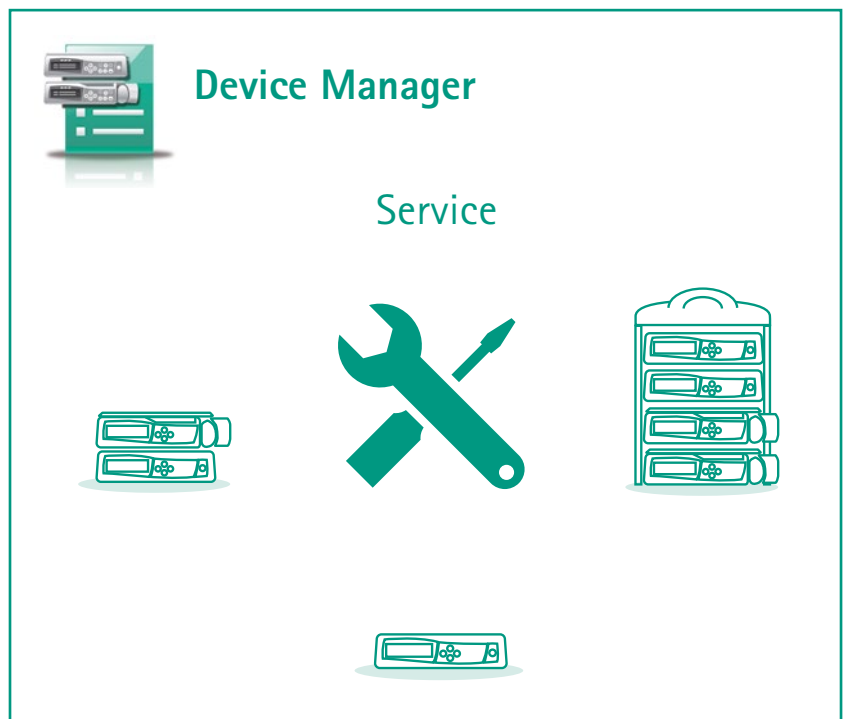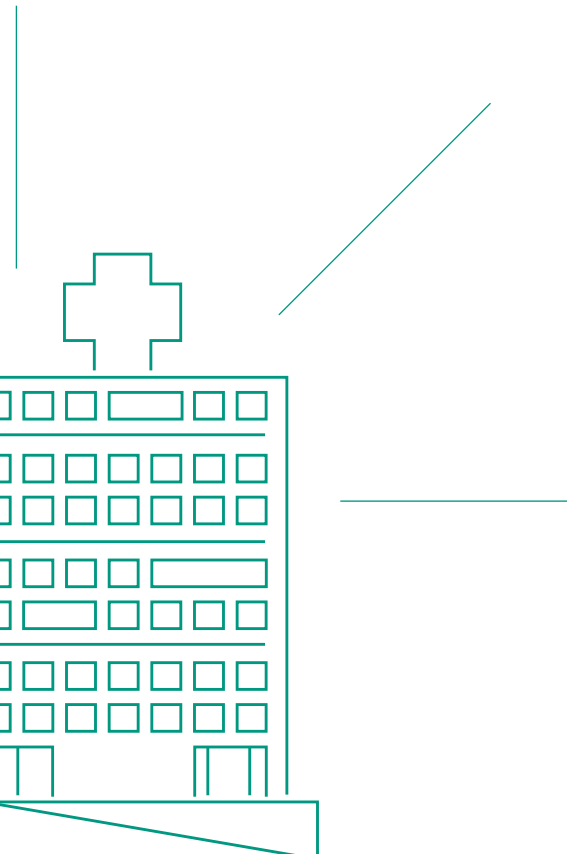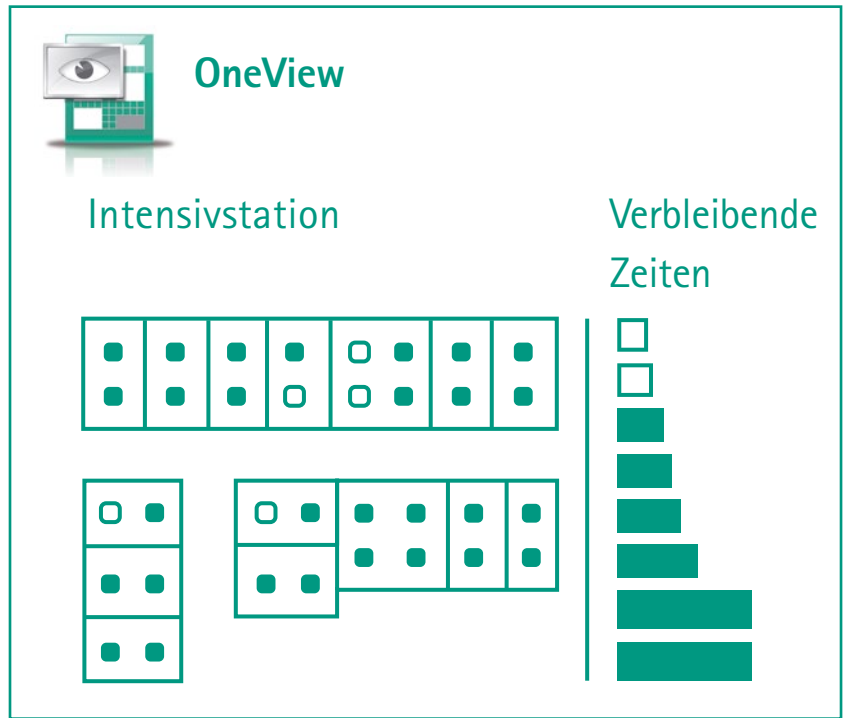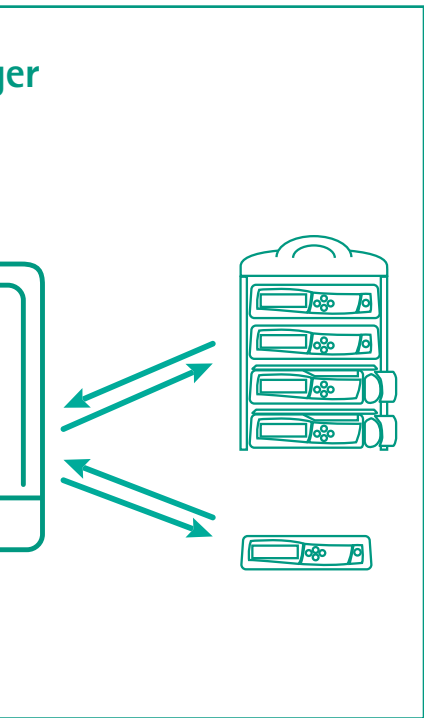

Drug Library Manager

Für standardisierte und individualisierte Medikamentendaten





Die Infusionstherapie ist in der medizinischen Versorgung elementar. Mit Hilfe von Infusionspumpen werden Arzneimittel präzise appliziert und die Flüssigkeits- und Volumentherapie gesteuert. Die Anwendung des Drug Library Managers zielt darauf ab, die Infusionstherapie effizienter und weniger komplex für Ärzte, Apotheker, Pflegepersonal und Patienten zu gestalten.

Über die Medikamentendatenbank lassen sich Infusionsgrenzen für alle Medikamente hinterlegen und die angelegten Arzneimittel ganz auf die Bedürfnisse und Verordnungen einer jeden Station zuschneiden. Damit eine Infusionspumpe sich auch mit dem Patienten bewegen kann, sind die B. Braun Infusionspumpen in der Lage, mehrere stationspezifische Datenbanken in sich zu tragen und je nach Ort und Station die jeweils für sie gültige Datenbank selbst zu aktivieren.

IHRE VORTEILE

- Zentrale Verwaltung aller Medikationsdaten
 - Kundenindividuelle Medikamentenverwaltung
 - Stationspezifische Medikamentendatenbanken
 - Verschiedene Datenbanken in einer Infusionspumpe
-

Upload Manager

Daten-Upload leicht gemacht

Können Sie sicherstellen, dass Ihre Infusionspumpen immer auf dem gleichen Stand sind? Und wie laden Sie neue Medikamenten- oder Konfigurationsdaten schnell auf alle Infusionspumpen?

Mit dem Upload Manager ist dies ganz einfach.

Der Upload Manager ist eine innovative Technologie, um die Prozesse zur Aktualisierung aller Infusionspumpen zu verbessern. Schnell und einfach lassen sich über das Krankenhausnetzwerk die Daten übertragen. Dabei wird ein Upload-Vorgang stets durchgeführt, ohne die Patientenversorgung an einem Bettplatz zu unterbrechen.

Upload Manager .WEB:

Der zentrale Upload wird durch die Verwendung von Web-Technologie durchgeführt und der jeweilige Status in Echtzeit überwacht.

IHRE VORTEILE

- Immer aktuelle Infusionspumpen
 - Zeitersparnis und Prozessoptimierung für Anwender und Medizintechnik
 - Keine zusätzlichen Arbeitsschritte
-





OneView

Für verbesserte Workflows in Ihrer Infusionstherapie





Die Anwendung OneView eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten, Ihre Arbeitsabläufe rund um die Infusionstherapie zu gestalten: Dank OneView behalten Sie auf Ihrer Station immer den Überblick.

Selbst von einem entfernten Standort aus können Sie den Status einer beliebigen ins Netzwerk eingebundenen Infusionspumpe abfragen. Der Echtzeit-Zugang zu therapiebezogenen Informationen wie Dosierungen, infundiertes Volumen und verbleibende Infusionszeiten ermöglicht eine proaktive Gestaltung Ihrer klinischen Prozesse und Abläufe und steigert so die Effizienz.

IHRE VORTEILE

- Erhöhte Effizienz durch Zentralisierung der Therapieübersicht
- Verringerte Alarmbelastung für Pflegepersonal und Patienten
- Verbleibende Zeitüberwachung ermöglicht es zu handeln, statt zu reagieren

B. BRAUN SHARING EXPERTISE SpaceOneView

Overview QuickView MyOneView Hilfe Intensiv IV | Ausloggen

Stationsübersicht: Intensiv IV

Restzeiten	Alarm	
Bett	Restzeit	Medikament und Pumpentyp
019	5 min.	Fentanyl 1,0
009	8 min.	Morphin
021	19 min.	Noradrenalin 10 mg
001	25 min.	Jonosteril 1000
018	38 min.	Dopexamin
018	42 min.	Morphin
005	56 min.	Thiopental
017	64 min.	Fentanyl 1,0
032	72 min.	Morphin

021 Noradrenalin 10 mg
Bett Druck zu hoch

019 Fentanyl 1,0
Bett Spritze fast leer

Copyright © 2009 B. Braun Melsungen AG

DoseTrac

Medikationsdaten einfach analysiert

DoseTrac ist eine Anwendung, die es z. B. Ärzten und Apothekern ermöglicht, gezielte Berichte und Reports über die verabreichten Arzneimittel zu generieren und so den Medikationsprozess zu analysieren und optimieren.

Über das Krankenhausnetzwerk lassen sich Echtzeit-Therapiedaten übertragen und von jedem Arbeitsplatz aus bewerten. Je nach Position und Verantwortung lassen sich so in einer Therapie schnell die richtigen Schlüsse ziehen und sich der Prozess der Infusionstherapie kontinuierlich verbessern.

IHRE VORTEILE

- Individuell vordefinierte Berichtslayouts
 - Einblicke in mögliche Medikamentenfehler
 - Ermittlung von Trainingsanforderungen für klinisches Personal
-





Device Manager

Zur Unterstützung der Medizintechnik





Der Device Manager ermöglicht es der Medizintechnik, den Pool an Infusionspumpen bestmöglich zu verwalten.

Dabei sind die wesentlichen Informationen zu jeder Infusionspumpe in einer Gesamtübersicht hinterlegt.

- Ortung der Infusionspumpen im Krankenhaus
- Überblick über den aktuellen Softwarestand aller Infusionspumpen
- Informationen zu den jeweils enthaltenen Medikamentendatenbanken
- Informationen zu den Sicherheitstechnischen Kontrollen

IHRE VORTEILE

- Alle Geräte stets auf dem neuesten Stand
 - Gerät mit einem Klick suchen
 - Effiziente Organisation der STKs
 - Optimierung des Pool-Managements
-

Produktübersicht

Software-Pakete und Einzellizenzen

PRODUKT	Art.-Nr.
B. Braun OnlineSuite	876100
LIZENZEN	Art.-Nr.
OnlineSuite OneView Lizenz	876103
OnlineSuite Upload Manager .WEB Lizenz	876105
OnlineSuite DoseTrac Lizenz	876106
OnlineSuite Device Manager Lizenz	876108

B. Braun Melsungen AG | 34209 Melsungen | Deutschland
Tel. +49 5661 71-0 | www.bbraun.de