

Dialog+ Zubehör

Praktisch. Flexibel. Effizient.



Hämodialyse

Dialog+ Zubehör

Flexible Erweiterungen für effiziente Abläufe






1 Universalfrontablage*
Schützt die Komponenten an der Vorderseite vor Beschädigung und dient gleichzeitig als Ablage für Spritzen und andere Kleinteile.



5 Probeentnahmeventil
Das Probeentnahmeventil für Dialysierflüssigkeit wird in den Dialysator-Zulaufschlauch integriert. Ohne Kanüle kann so mit einer Spritze direkt Dialysierflüssigkeit entnommen werden.



2 Monitorminiablage*
Abnehmbare Miniablage unterhalb des Monitors für Kleinteile wie Spritzen oder Klemmen.

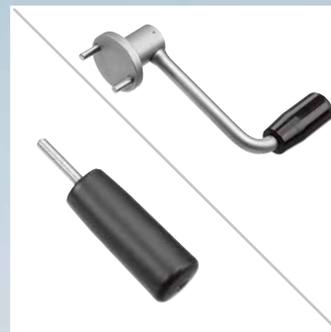

6 Kurbel/Kurbelstift
Kurbel bzw. Kurbelstift zur manuellen Betätigung der Blutpumpe bei Stromausfall.



3 Dialysatorhalter, Metall
Dreh- und schwenkbarer Aluminiumhalter für Dialysatoren inkl. Haltevorrichtung für Blutschläuche.



7 Flache Kombiablage
Flache, abnehmbare Ablage aus Metall zur Befestigung hinter dem Monitor. Zum Abstellen von Verbrauchsmaterialien und anderen Geräten wie Perfusor®, Infusomat® etc. Mit integrierter Vertiefung zum Ablegen von Kleinteilen.



4 Spülbehälter
Abnehmbarer Spülbehälter zum Auffangen von Kochsalzlösung inkl. Schlauchhalter.



8 Multifunktionsablage
Plastikschale für die flexible Aufbewahrung von Verbrauchsmaterialien, Geräten und anderen Artikeln. Leicht abzunehmen und zu reinigen (ohne dass zusätzliches Werkzeug benötigt wird).

* **1 2** Nicht in Kombination erhältlich.



9 Box Comfort
Multifunktionale Box mit einer Ablagemöglichkeit für das Patientenprotokoll und einem separaten Fach für sämtliche Verbrauchsmaterialien.



13 Halter für Desinfektionsmittelkanister
Halterung an der Rückseite des Dialog+ Gerätes, erhältlich für 6- und 10-Liter-Desinfektionsmittelkanister. Kann zu Reinigungszwecken leicht abgenommen werden.



10 Halter oder Korb für Blutdruckmanschette**
Praktischer Haken an der Seite des Dialysegerätes zum Einhängen der Blutdruckmanschette. Korb an der linken Seite des Dialysegerätes zum Einstecken der Blutdruckmanschette.



14 Universalsockelablage
Ablage an der Rückseite des Dialog+ Gerätes zur Aufnahme einer Ein-Platz-Osmose-Anlage oder alternativ für zwei Desinfektionsmittelkanister à 10 Liter. Nur für Dialog+ Standardgeräte erhältlich.



11 Halter für Konzentratbeutel**
Praktischer Halter für Hämodialysekonzentrate in Beuteln.



12 Protokollablage**
Seitliche, leicht zugängliche Ablage zur Aufbewahrung der Patientenakte.

** 10 11 12 Nicht in Kombination erhältlich.

Produktsortiment

	Artikelnummer	Produktbezeichnung	Verpackungseinheit
1	7105239	Universalfrontablage	1 Stück
2	7102872	Monitorminiablage	1 Stück
3	7107426	Dialysatorhalter, Metall	1 Stück
4	7105237	Spülbehälter	1 Stück
5	7102867	Probeentnahmeventil	1 Stück
6	34560157	Kurbelstift für die Blutpumpe	1 Stück
6	34518355	Kurbel für die Blutpumpe	1 Stück
7	7102871	Flache Kombiablage (SW-Versionen < 9.xx)	1 Stück
7	7102890	Flache Kombiablage (SW-Versionen ≥ 9.xx)	1 Stück
7	7102869	Rutschfeste Unterlage für die flache Kombiablage	1 Stück
8	7105238	Multifunktionsablage	1 Stück
9	7107322	Box Comfort	3 Stück zzgl. 4 roter, 4 blauer und 4 transparenter Ringe
10	7102781	Halter für Blutdruckmanschette	1 Stück
10	7102865	Korb für Blutdruckmanschette	1 Stück
10	7102372	ABPM-Manschette, latexfrei, inkl. Schlauch, klein	1 Stück
10	7102771	ABPM-Manschette, latexfrei, inkl. Schlauch, mittel	1 Stück
10	7102380	ABPM-Manschette, latexfrei, inkl. Schlauch, groß	1 Stück
11	7102877	Halter für Konzentratbeutel	1 Stück
12	7102873	Protokollablage	1 Stück
13	7102277	Halter für Desinfektionsmittelkanister (für 6 l oder 10 l)	1 Stück
14	7105500	Universalsockelablage	1 Stück

